

 ЕЛАМЕД

АЛМАГ+

Кароткая інструкцыя па падрыхтоўцы
прылады да працы

КОПИЯ
ВЕРНА

elamed.com

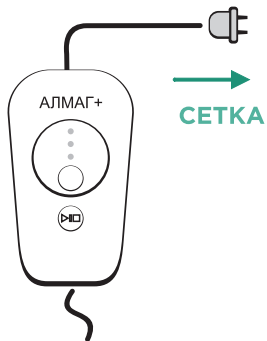
24.08.2024



Больш падрабязную інфармацыю, у тл. паказанні, супрацьпаказанні, парадак выкарыстання па прызначэнні, метадыкі правядзення працэдур і іншае глядзіце ў кіраўніцтве па эксплуатацыі.

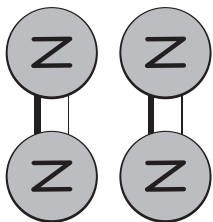
1

Падлучыце сеткавы шнур да разетки электрасілкавання. Індикатар кнопкі «Пуск/Стоп» павінен міргаць зялёным колерам.

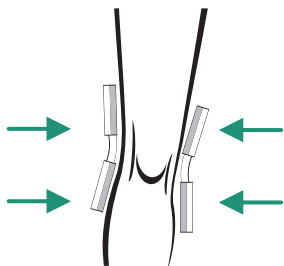
**2**

Размясціце выпраменьвальнікі ў адпаведнасці з указаннямі, прыведзенымі ў методыцы лячэння.

ВАЖНА!!! Працоўныя паверхні з маркіроўкай «N» (паўночны полюс, шэры бок шпуляў) павінны быць звернутыя ў бок вобласці ўздзеяння (да цела).



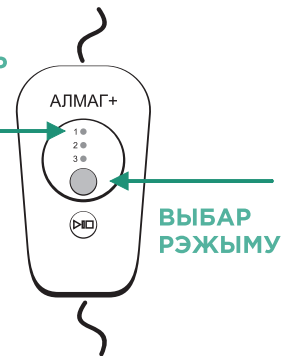
ДА ЦЕЛА



КАЛЕНА

3

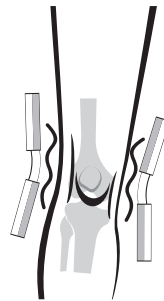
З дапамогай кнопкі выбару рэжыму усталюйце неабходны рэжым уздзеяння.

ІНДИКАТАР
РЭЖЫМАЎ**4**

Для запуску працэдуры ўздзеяння аднаразова націсніце кнопку «Пуск/Стоп».

5

Працэдура запушчана.

ВЫПРАМЬНЬВАННЕ
МАГНІТНАГА ПАЛЯ

**ПРАЦЭДУРЫ ПРАВОДЗЯЦА ў АДПАВЕДНАСЦІ
З КІРАЎНІЦТВАМ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ**



АЛМАГ+

Құрылғыны жұмысқа дайындау бойынша қысқаша



Толығырақ ақпарат, оның ішінде көрсетілімдер, қарсы көрсетілімдер, мақсатына сай қолдану тәртібі, процедураларды жүргізу әдістемелері және т. б. пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген.

КОПИЯ
ВЕРНА

elamed.com

24.07.2024



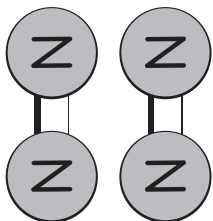
1

Аппараттың желілік баусымын қуат көзінің розеткасына қосыңыз. «Іске қосу/Тоқтату» батырмасының индикаторы жасыл түспен жыпылықтауы керек.

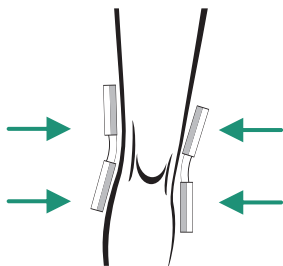
**2**

Сәулелендіргіштерді емдеу әдістемесінде көрсетілген нұсқауларға сәйкес орналастырыңыз.

МАҢЫЗДЫ!!! «N» (солтүстік полюс, шарғылардың сұр жағы) таңбаламасы бар жұмыс беттері әсер ету аймағына (денеге қарай) қаратылуы тиіс.



ДЕНЕГЕ ҚАРАЙ

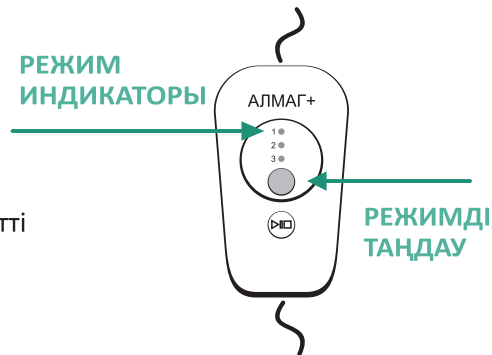
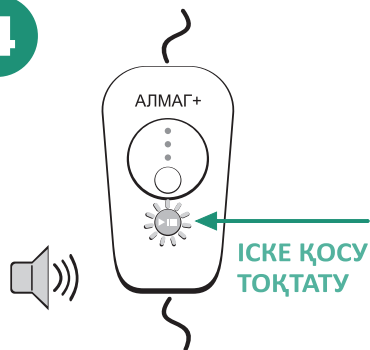


ТИЗЕ

3

Режимді таңдау батырмасын пайдаланып қажетті әсер ету режимін орнатыңыз.

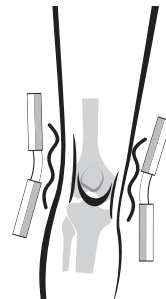
РЕЖИМ
ИНДИКАТОРЫ

**4**

Әсер ету процедурасын іске қосу үшін «Іске қосу/Тоқтату» батырмасын бір рет басыңыз.

5

Процедура іске қосылды.



МАГНИТ ӨРІСІНІҢ
СӘУЛЕЛЕНУІ

**ПРОЦЕДУРАЛАР ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚҚА СӘЙКЕС ЖҮРГІЗІЛЕДІ**

 ЕЛАМЕД

АЛМАГ+

Түзмөктү иштөөгө даярдоо
боюнча кыскача нускама

КОПИЯ
ВЕРНА

elamed.com

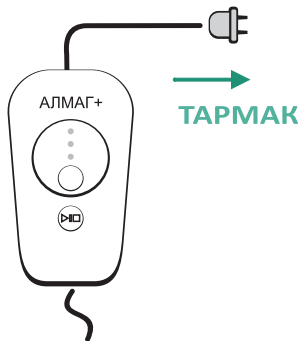
24.07.2024



Кененирээк маалыматты, анын ичинде көрсөтмөлөр, каршы көрсөтмөлөр, дайындалышы боюнча колдонуу тартибин, процедураларды жүргүзүү ыкмасын ж.б. эксплуатациялоо боюнча колдонмодон караңыз.

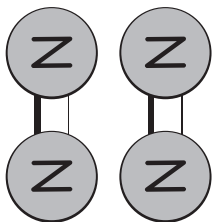
1

Аппараттын тармактык шнурун электр азыктануу тармагына кошуңуз. «Пуск/Стоп» баскычынын индикатору жашыл түс менен жанып турушу керек.

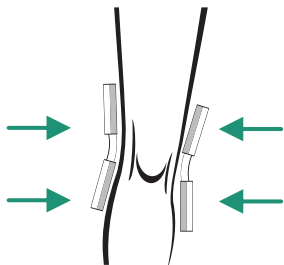
**2**

Нурлантуучуларды дарылоо ыкмасында берилген көрсөтмөлөргө ылайык жайгаштырыңыз.

МААНИЛҮҮ!!! «N» маркировкасы менен жумушчу беттер (түндүк уюл, катушканын боз капталы) таасир этүү жерине көздөй (денеге) багытталууга тийиш.



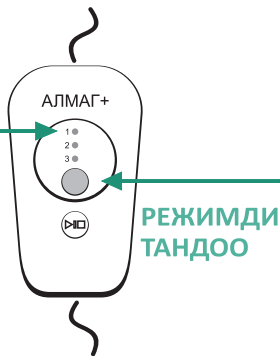
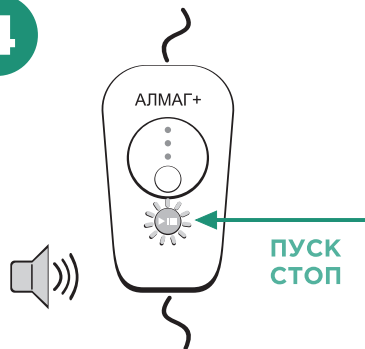
ДЕНЕГЕ



ТИЗЕ

3РЕЖИМДЕР
ИНДИКАТОРУ

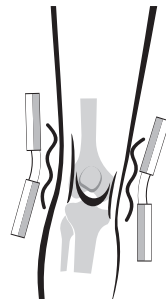
Режимди тандоо баскычынын жардамы менен таасир этүүнүн тиешелүү режимин тандаңыз.

РЕЖИМДИ
ТАНДОО**4**ПУСК
СТОП

Таасир этүү процедурасын ишке киргизүү үчүн «Пуск/Стоп» баскычын бир жолу басыңыз.

5

Процедура ишке киргизилди.

МАГНИТ
ТАЛААСЫНЫН
НУРЛАНУУСУ

**ПРОЦЕДУРАЛАР ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА
КОЛДОНМОГО ЫЛАЙЫК ЖҮРГҮЗҮЛӨТ**